

MinSP måling


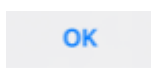


Sådan gennemføres målinger af blodsukker


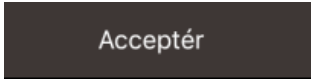

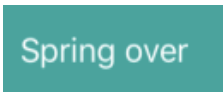



Du skal bruge iPhone samt et udleveret blodsukkerapparat. Har du ikke selv en iPhone vil afdelingen være dig behjælpelig med, at du kan låne en. Afdelingen har hjulpet dig til at få sat iPhone op til at den kan modtage værdierne fra blodsukkerapparatet. blodsukkerværdien overføres nu automatisk til din elektroniske journal på hospitalet.

BEMÆRK! Blodsukkerapparatet er personligt, da målingerne overføres direkte til din journal på hospitalet. Lån det derfor ikke ud til andre.

Du er blevet bedt om at måle værdier om ugen. Nedenfor forklares, hvordan det gøres for blodsukker.

Trin 1: Opsætning af forbindelse med Blodsukkermåler med Accu-chek


Handling	Forklaring	Illustration
Åbn appen	Når appen er downloadet, tryk på knappen "ÅBN". Appen åbner herefter.	
Tillad brug af Bluetooth	Du ser evt. et pop-up vindue med teksten "'ACCU-CHEK' vil bruge Bluetooth". Her vælger du "OK".	
Slå meddelelser fra appen fra.	Der kommer et pop-up vindue med teksten "'ACCU-CHEK' vil gerne sende dig meddelelser". Her vælger du "Tillad ikke".	
Slå nogle kategorier til	<p>En side vises, hvor der står "'ACCU-CHEK' vil have adgang til at opdatere dine sundhedsdata i kategorierne nedenfor".</p> <p>Vælg <u>ikke</u> "Slå alle kategorier til" som vises med rød tekst. Scrol ned og slår følgende kategorier til så knappen bliver grøn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blodsukker 	 <p>Blodsukker <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Kulhydrater <input type="checkbox"/></p>

<p>Tryk "Tillad"</p>	<p>Tryk herefter "Tillad" som står med rødt i øverste højre hjørne af skærmen.</p>	
<p>Acceptér "Vilkår & betingelser"</p>	<p>Du får nu vist "Vilkår & betingelser for licens".</p> <p>Tryk her "Acceptér".</p>	
<p>Luk pop-up vinduet</p>	<p>Du får vist et pop-up vindue med teksten "Bemærk – Denne app er kun beregnet til brug på en enkelt patient."</p> <p>Tryk "OK".</p>	
<p>Spring instruktioner over</p>	<p>Du får nu vist en række instruktionsoplysninger.</p> <p>Vælg "Spring over" i nederste venstre hjørne.</p>	
<p>Indstillinger for parring til blodsukkerapparat</p>	<p>Du kommer nu til siden "Opstart".</p> <p>Vælg "Pardan blodsukkerapparat".</p>	
<p>Pardan med det ønskede apparat</p>	<p>Du kommer nu til siden "Pardan apparat"</p> <p>Vælg "Flere knapper".</p>	
<p>Færdiggør parringen på blodsukkerapparatet</p>	<p>Du vises herefter en vejledning i hvordan du færdiggør parringen på blodsukkerapparatet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tænd apparatet ved at trykke "OK". • Vælg "Dansk" med hjælp af piler og tryk "OK". • Vælg "Indstillinger" og tryk "OK". 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Vælg "Trådløs" og tryk "OK". • Vælg "Pardannelse" og tryk "OK". • Vælg "Pardan enhed" og tryk "OK". Nu vises en koden på skærmen. • Når dette er gjort tryk "Næste" i øverste højre hjørne på iPhonen. 	
<p>Pardan med dit blodsukkerapparat</p>	<p>Sørg for at Bluetooth er slået til på din telefon.</p> <p>Din telefon forsøger at finde dit blodsukkerapparat. Når den bliver vist på listen, vælg den ved at trykke på den (f.eks. meter+07355531).</p>	<p>Vælg dit blodsukkerapparat nedenfor. Indtast derefter den kode, der vises på blodsukkerapparatet.</p>  <p>meter+07355531</p>
<p>Indtast paringskode</p>	<p>Du får vist et pop-up vindue med teksten "Anmodning om Bluetooth-pardannelse "meter+xxxx"-tilbehøret vil gerne danne par med din iPhone. Skriv koden, der vises på "meter+xxxx"".</p> <p>Indtast paringskoden fra dit blodsukkerapparat og tryk "Dan par".</p>	<p>Fuldført!</p>  <p>Dit blodsukkerapparat er pardannet!</p> <p>Vis synkroniseringsdetaljer ></p> <p>Synkronisér tid aktiveret</p> <div data-bbox="981 1736 1340 2049"> <p>Anmodning om Bluetooth-pardannelse</p> <p>"meter+07355531"-tilbehøret vil gerne danne par med din iPhone. Skriv koden, der vises på "meter+07355531".</p> <input type="text"/> <p>Annuller Dan par</p> </div>

Pardannelse fuldført	<p>Du får nu vist en side der bekræfter at pardannelsen er fuldført.</p> <p>Tryk "OK" i øverste højre hjørne " og forbindelsen til blodsukkerapparatet er etableret.</p>	
----------------------	--	--

Trin 2

Handling	Forklaring	Illustration
Se dit blodsukker	<p>Det målte blodsukker se nu på blodsukkerapparatet</p> <p>Du kan også se værdierne i "MinSP". Dette gør du ved at åbne appen "MinSP". Tryk på menu-punktet "Mine målinger", og scrol ned indtil du ser målinger under "Indsendes automatisk".</p>	 <p>The illustration shows a screenshot of the MinSP app's main menu. It features five icons arranged in two rows. The top row contains 'Aftaler' (calendar icon), 'Menu' (hamburger icon), and 'Spørgesmaer' (checklist icon). The bottom row contains 'Meddelelser' (envelope icon) and 'Mine målinger' (bar chart icon). The 'Mine målinger' icon is highlighted with a red circle.</p>

Har du brug for teknisk hjælp? Ring til patientsupporten

Ring til os på tlf. 31 90 83 64, alle hverdage ml. kl. 9-14.

Har du spørgsmål vedrørende din behandling

Kontakt da afdelingen, du er tilknyttet