

Overfør INR fra CoaguChek til AK-Online

INR målt med CoaguChek INRange kan overføres sikkert til systemet via Bluetooth. For at overførslen kan ske, skal din telefon/tablet være parret med CoaguChek-apparatet. Så snart de er parret, kan overførslen begynde.


Par CoaguChek med din telefon/tablet – skal kun gøres én gang

Følg nedenstående vejledning punktvis for at Bluetooth-parre dine to enheder med hinanden.

1. Tryk på menuen **Registrer INR**. Du vil nu få vist fanebladet **CoaguChek**.



2. På dit **CoaguChek**-apparat skal du gå til **Indstillinger** og vælge **Dataoverførsel** nederst og dernæst **Bluetooth**. Tryk **Gem**.
3. På din telefon skal du nu trykke **Start pardannelse**. Pardannelsen går nu i gang.
4. Tryk på **Dan Par** på din telefon/tablet, hvis den viser dig dette eller lignende skærbillede.

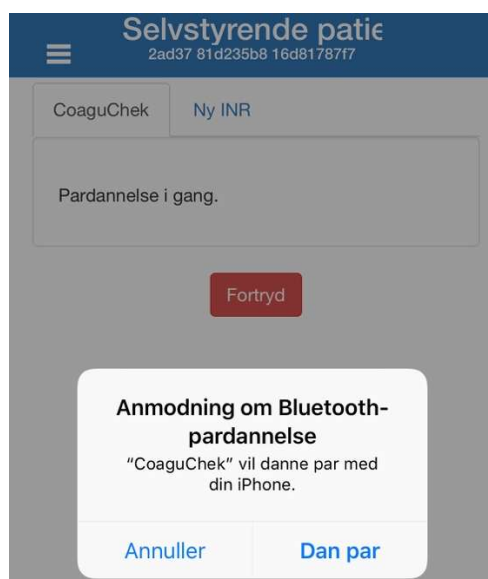

Overfør INR fra CoaguChek til AK-Online

Pardannelsen er nu færdig og vil blive gemt på de to enheder og skal derfor normalt ikke gøres igen, medmindre du får ny telefon/tablet eller CoaguChek, eller at pardannelsen af andre årsager ikke længere eksisterer.

Næste gang du logger ind, skal du således ikke pardanne enhederne igen.

Overfør INR

Følg nedenstående vejledning punktvis for at overføre INR fra dit CoaguChek-apparat.

1. På din telefon skal du gå til menuen **Registrer INR i AK-Online** (faneblad **CoaguChek**).



2. På dit **CoaguChek-apparat** skal du gå til **Mine resultater** og dernæst vælge **Overfør Data**.
3. På din telefon skal du trykke **Overfør data**. Overførslen sker nu automatisk.
4. Når overførslen er færdig, vises nu på din telefon den overførte INR med oplysning om dato og tidspunkt for måling. Har du valgt en kommentar til INR på CoaguChek, overføres denne også og vil blive vist her.
Bemærk, at alle INR, der ligger i CoaguChek og som ikke er overført til AK-Online, vil blive overført i samme omgang. Derfor kan der være vist flere INR på skærbilledet i app'en.
5. Du kan vælge kommentarer til INR i app'en.
6. Tryk til sidst på **Gem** for at gemme data.
7. Er du selvstyrende, vil du nu få vist doseringssiden, hvor du skal foretage din dosering. Er du selvtestende, får du vist **Oversigt**, hvor den nye dosering fra din AK-behandler vil blive vist, når den er klar.

Overfør INR fra CoaguChek til AK-Online

Hvis du oplever problemer med overførslen

Problem	Løsning
"Denne CoaguChek kan ikke genkendes af AK-systemet. Kontakt din AK-behandler"	Dit CoaguChek-apparat er ikke blevet tildelt dig i din behandlers AK-system. Denne tildeling er nødvendig for at du kan overføre INR fra CoaguChek. Du skal kontakte din AK-behandler.
"Din mobile enhed er ikke parret med din CoaguChek"	Følg anvisningen til pardannelse af din telefon/tablet med dit CoaguChek-apparat. Svar "Ja", hvis CoaguChek spørger, om der skal dannes par med ny enhed.
CoaguChek skriver, der ikke er valgt hverken USB eller Bluetooth	Dit CoaguChek-apparat skal parres på ny med din telefon/tablet. Slet først pardannelsen på din telefon/tablet ¹ . Gå til Registrer INR . Gå derefter til Indstillinger på din CoaguChek og vælg Dataoverførsel og Bluetooth . Tryk Gem . På din telefon/tablet skal du trykke Overfør Data . Godkend pardannelsen på din telefon/tablet.
Data overføres ikke App'en søger efter CoaguChek, men vender tilbage til skærmen med knappen "Overfør data"	Sørg for at Bluetooth er slået til på din telefon/tablet og sørg samtidig for at dit CoaguChek-apparat er i Mine Resultater -> Overfør data . Prøv derefter at overføre igen. Ellers prøv at starte pardannelse igen. Sørg for at slette pardannelsen på din telefon/tablet først. Svar "Ja", hvis CoaguChek spørger, om der skal dannes par med ny enhed.
"Alle INR-resultater på din CoaguChek er overført tidligere"	Der er ingen INR på dit CoaguChek-apparat, som kan overføres, da alle INR er blevet overført på et tidligere tidspunkt. Gå til siden Oversigt i AK-Online og se din seneste INR og sammenlign derefter dette resultat med din INR på CoaguChek. Er disse resultater ikke ens, så prøv at overføre data igen. Ellers kontakt din AK-behandler.
"Der opstod en fejl under kommunikationen med din CoaguChek"	Sørg for at dit CoaguChek-apparat er tændt og at den er i Indstillinger -> Dataoverførsel og har valgt Bluetooth . Tryk Gem og prøv at danne par igen. Ellers prøv at slette pardannelsen på din telefon og start derefter pardannelse igen.
CoaguChek skriver, der ikke kan oprettes forbindelse til din telefon/tablet	Sørg for din telefon/tablet er tændt, at Bluetooth er slået til og at du er i app'en på siden Registrer INR og har trykket Overfør data . Prøv at overføre data igen fra CoaguChek.
Hvis ingen af ovenstående løsninger virker	Slet pardannelsen på din telefon/tablet samt på dit CoaguChek-apparat. Slet og geninstaller app'en. Sluk og tænd for begge enheder og start pardannelse igen. Kontakt din AK-behandler hvis problemet fortsætter.

¹ I **IOS** (iPhone/iPad) fjernes en pardannelse ved at gå til **Indstillinger**, vælge **Bluetooth** og dernæst trykke på ikonet, i, ud til højre for navnet på dit CoaguChek-apparat. Tryk dernæst på **Glem denne enhed**.

I **Android** (fx Samsung, Motorola, Huawei) skal du gå til **Indstillinger**, vælge **Enhedstilslutning** og dernæst **Bluetooth**, trykke på ikonet, i, ud for navnet på dit CoaguChek-apparat og trykke **Ophæv parring**.