

Vægtmåling i MinSP

Sådan gennemfører du vægtmålinger og svarer på spørgsmål



Du skal bruge en iPhone, og den vægt, du har fået udleveret på hospitalet. Har du ikke selv en iPhone, vil du låne en af afdelingen. Afdelingen har hjulpet dig til at få sat en iPhone op til, at den kan modtage værdier fra vægten.

BEMÆRK! Vægten er personlig, da målingerne overføres direkte til din journal på hospitalet. Lån derfor ikke vægten ud til andre.


Du er blevet bedt om at måle din vægt. Læs om, hvordan du gør.

Gå til trin 4, vis du ikke kan se din vægt i mine målinger

Trin 1 - Åben A&D Connect

Handling	Forklaring	Illustration
Åbn A&D Connect- appen	Find "A&D Connect" appen på din telefon og åbn den.	
Tryk "Start"	Du får nu vist A&D appens startside. Tryk på "Start" midt på skærmen.	

Trin 2 – Mål din vægt

Handling	Forklaring	Illustration
Tænd vægten	Træd op på vægten. Vægten tænder selv, når du træder på den. Når vejningen foretages, viser displayet en række streger.	
Fortag vejning	Vejningen starter automatisk, når du står på vægten.	






	<p>Når vejningen er færdig, står der "Step Off" på displayet. Så kan du træde ned fra vægten.</p> <p>Når vægten er overført til iPhone, vises den på "Your Dashboard" under "Weight Scale".</p> <p>OBS! Du skal veje dig uden sko og helst om morgenen.</p>	
Se din vægt	<p>Den målte vægt kan nu ses i appen A&D Connect.</p> <p>Du kan også se dine vejninger i appen "MinSP".</p> <p>Dette gør du ved at åbne appen "MinSP". Tryk på menupunktet "Mine målinger", og scroll ned, indtil du ser målinger under "Indsendes automatisk".</p> <p>Vægten overføres nu automatisk til din elektroniske journal på hospitalet.</p>	


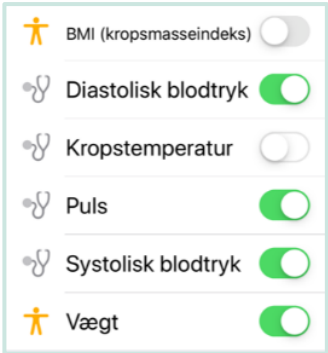

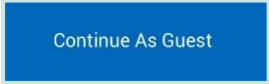

Trin 3 – Svar på spørgeskema

Handling	Forklaring	Illustration
Åbn MinSP	Find "MinSP" appen på din telefon og åbn den.	
Log ind i MinSP	Brug din pinkode til at logge ind i MinSP.	
Tryk på "Mine målinger"	Du ser nu hovedmenuen i MinSP. Tryk på "Mine målinger".	
Tryk på "Tilføj aflæsninger"	Vælg "Tilføj aflæsninger" i bunden af skærmen.	

Tryk på spørgsmålet	Du kan nu se alle spørgsmål. Du svarer på dem ved at trykke på dem et ad gangen. Her er spørgsmål til en hjerterepatient vist.	
Svar på spørgsmålet	Vælg mellem "Ja" eller "Nej", eller indtast en værdi, hvis det er det, der efterspørges.	
Gem svaret	Efter du har svaret på alle fem spørgsmål, tryk på "Gem" i øverste højre hjørne. Dine svar overføres nu automatisk til din elektroniske journal på hospitalet.	
Se dine svar	Du kan altid se dine svar i appen "MinSP". Dette gør du ved at åbne appen "MinSP". Tryk på menu-punktet "Mine målinger", og tryk herefter på spørgsmålet, du vil svare på.	

Trin 4 Opsætning af A&D Connect appen (bruges hvis din værdi ikke kan ses)

Handling	Forklaring	Illustration
Åbn App Store	Åbn App Store.	
Download A&D Connect smart	Under "Søg", indtast "A&D Connect smart" og download appen.	
Åbn appen	Når appen er downloadet, tryk på knappen "ÅBN". Appen åbner herefter.	

<p>Tillad ikke sendingen af meddelelser</p>	<p>Der kommer et pop-up vindue med teksten "A&D Connect" vil gerne sende dig meddelelser". Her vælger du "Tillad ikke".</p>	
<p>Slå nogle kategorier til</p>	<p>En side vises, hvor der står "A&D Connect" vil have adgang til at opdatere dine sundhedsdata i kategorierne nedenfor".</p> <p>Vælg ikke "Slå alle kategorier til" som vises med rød tekst. Scrol ned og slår følgende kategorier til så knappen bliver grøn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diastolisk blodtryk • Puls • Systolisk blodtryk • Vægt 	
<p>Tryk "Tillad"</p>	<p>Tryk herefter "Tillad" som står med rød i øverste højre hjørne af skærmen.</p>	
<p>Tryk "Continue As Guest"</p>	<p>Du får nu vist A&D appens startside. Tryk på "Continue As Guest" midtfor nederst på skærmen.</p>	
<p>Tillad brug af Bluetooth</p>	<p>Der vises nu en pop-up vindue med teksten "A&D Connect" vil bruge Bluetooth To connect A&D BLE devices". Her trykker du "OK"</p>	
<p>Vælg hvilke måleapparater der skal pares</p>	<p>Du vil nu få vist et pop-up vindue med teksten "Alert Please setup your device..."</p>	

	<p>Åben nu "Device Setup" siden ved at trykke på de tre hvide striber i øverste venstre hjørne og vælg herefter "Device Setup".</p>	 
	<p>Herefter vælges, hvilke måleapparater din telefon skal forbindes med via Bluetooth.</p>	

Har du brug for teknisk hjælp? Ring til patientsupporten

Ring til os på tlf. 31 90 83 64, alle hverdage ml. kl. 9-14.

Har du spørgsmål vedrørende din behandling

Kontakt da afdelingen, du er tilknyttet.