

MinSP måling





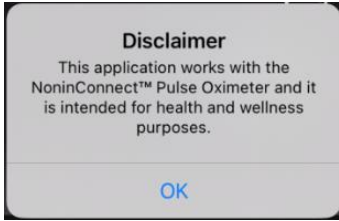
Sådan gennemføres målinger af iltmætning

Du skal bruge iPhone samt en udleveret saturationsmåler. Har du ikke selv en iPhone vil afdelingen være dig behjælpelig med, at du kan låne en. Afdelingen har hjulpet dig til at få sat iPhone op til at den kan modtage værdierne fra saturationsmåleren. Iltmætningsværdien overføres nu automatisk til din elektroniske journal på hospitalet.

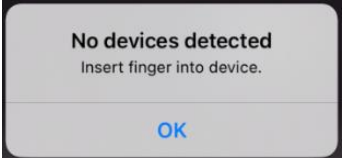

BEMÆRK! Saturationsmåleren er personligt, da målingerne overføres direkte til din journal på hospitalet. Lån den derfor ikke ud til andre.

Du er blevet bedt om at måle værdier. Nedenfor forklares, hvordan det gøres for iltmætning.


Trin 1 - Åben NoninConnect smart

Handling	Forklaring	Illustration
Åbn App Store	Åbn App Store	
Download Nonin-Connect smart	Under "Søg" indtast "Nonin" og download appen.	
Åbn appen	Når appen er downloadet, tryk på knappen "ÅBN". Appen åbner herefter.	
Tillad Nonin-Connect at benytte Bluetooth	Der kommer et pop-up vindue med teksten "A&D Connect" vil gerne sende dig meddelelser". Her vælger du "Tillad ikke".	
Disclaimers – Tryk OK	Der kommer et pop-up vindue med teksten "Disclaimer" – her trykkes OK	

Trin 2 – Mål din iltmætning





Handling	Forklaring	Illustration																		
Indsæt finger i pulsmåler for at aktivere	<p>For at appen skal kunne registrere Pulsmåleren, skal du indsætte en finger i måleren.</p> <p>Når dette er gjort, vil måleren komme op nederst i billedet og appen og måleren kan parres.</p>	 																		
Anmodning om parring	Når appen har registreret måleren, skal man danne par. Tryk på Dan par																			
Vælg målingstype	Vælg altid Spot-Check																			
Overblik over målinger	Efter man har foretaget måling, trykkes Exit nederst i højre hjørne. Der kommer en advarsel op, som fortæller at al ikke-gemt data går tabt. Tryk Exit	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date/Time</th> <th>SpO2</th> <th>Pulse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07-05-21 10:29</td> <td>98</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>07-05-21 10:29</td> <td>98</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Date/Time	SpO2	Pulse	07-05-21 10:29	98	65	07-05-21 10:29	98	65									
Date/Time	SpO2	Pulse																		
07-05-21 10:29	98	65																		
07-05-21 10:29	98	65																		

	Derefter kan målingerne aflæses (som på billedet) i en tabel.	
Apples Sundhedsapp åbnes - slå tilladelser til	Luk Appen helt ned. Når Appen NoninConnect åbnes igen, skal der gives adgang til, at data dele med Apple Sundhedsapp. Slå alle kategorier til.	

Handling	Forklaring	Illustration
Se din iltmætning	Den målte iltmætning ... Du kan også se værdierne i "MinSP". Dette gør du ved at åbne appen "MinSP". Tryk på menupunktet "Mine målinger", og scrol ned indtil du ser målinger under "Indsendes automatisk".	

Trin 3 – Svar på spørgeskema

Handling	Forklaring	Illustration
Åbn MinSP	Find "MinSP" appen på din telefon og åbn den.	
Log ind i MinSP	Brug din pinkode til at logge ind i MinSP.	
Tryk på "Mine målinger"	Du ser nu hovedmenuen i MinSP. Tryk på "Mine målinger".	
Tryk på "Tilføj aflæsninger"	Vælg "Tilføj aflæsninger" i bunden af skærmen.	
Tryk på spørgsmålet	Du kan nu se alle spørgsmål. Du svarer på dem ved at trykke på dem en ad gangen. Her vist som spørgsmål til en hjertepatient	<p>Har du oplevet at blive forpustet ved fysisk aktivitet siden sidste måling? ></p> <p>—</p> <p>Har du oplevet hjertebanken siden sidste måling? ></p> <p>—</p> <p>Har du oplevet svimmelhed ved anstrengelse siden sidste måling? ></p>

Svar på spørgsmålet	Vælg mellem "Ja" eller "Nej", eller indtast en værdi, hvis det er det, der efterspørges.		
Gem svarer	Efter du har svaret på alle 5 spørgsmål, tryk på "Gem" i øverste højre hjørne. Dine svar overføres nu automatisk til din elektroniske journal på hospitalet.		
Se dine spørgsmål-svar	Du kan altid se dine svar i appen "MinSP". Dette gør du ved at åbne appen "MinSP". Tryk på menupunktet "Mine målinger", og tryk herefter på spørgsmålet du gerne vil svare på.	  	

Har du brug for teknisk hjælp? Ring til patientsupporten

Ring til os på tlf. 31 90 83 64, alle hverdage ml. kl. 9-14.

Har du spørgsmål vedrørende din behandling

Kontakt da afdelingen, du er tilknyttet